


Sada pro vakuovou frakční destilaci NZ 24/29, BS

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 23.05.2025/DE1

Objednací číslo: 1245021

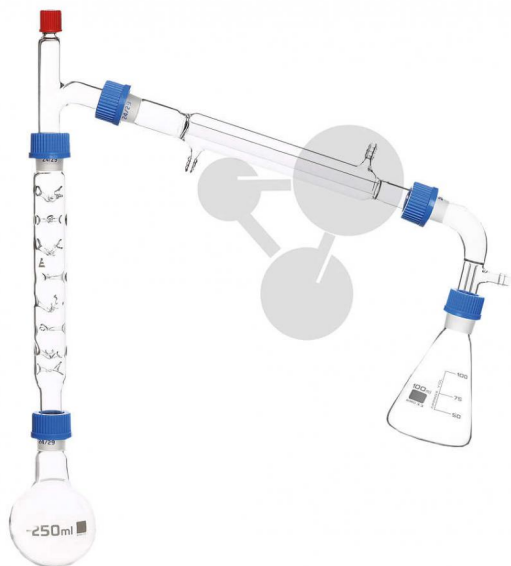

na stránku s
pomůckou

2.528,64 Kč s DPH

Při frakční destilaci se směs různých kapalných látek odděluje podle bodu varu. Směs se umístí do kulaté varné baňky, na kterou se nasadí frakční kolona. Kolona umožňuje lepší separaci složek směsi díky rozdílným bodům varu jednotlivých látek. Díly aparatury jsou opatřeny šroubovacími svorkami pro fixaci normalizovaných zábrusů. Díky nim nehrozí vznik netěsností a rozpadu aparatury. Celá souprava je vhodná i pro použití ve vakuu.

Objem:

100 ml

Rozsah dodávky:

Vigreuxova kolona, destilační hlava, Liebigův chladič, předloha destilační (alonž) s NZ a skleněnou olivkou pro vakuovou destilaci, Erlenmeyerova baňka 100 ml

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER